




## Istruzioni

La metodica di riferimento NIOSH 6004 prevede l'utilizzo in serie di nr. 2 cassette precaricate, collegate fra loro con un piccolo tubo; la cassetta identificata con "FRONT" sarà quella in cui entra l'aria da campionare, mentre la cassetta identificata con "BACK" sarà quella che è collegata con un tubo al campionatore personale.

La cassetta "FRONT" contiene un filtro MCE con relativo PAD, mentre la cassetta "BACK" contiene il filtro MCE trattato. Questo lo schema di collegamento:

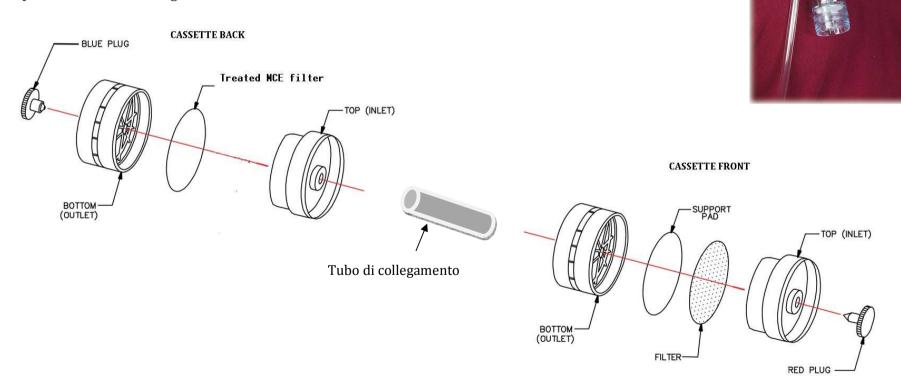



Via Pietro Chiesa, 25 r. – 16149 Genova – Italia
Tel. (+39) 010-469.56.61 r.a. Fax (+39) 010.642.42.05
e-mail: info@recomind.com www.recomindustriale.com